




Trusted by Hospitals, Loved by Moms.

Ameda HygieniKit H Series Milk Collection System

Intended Use - Single patient

The HygieniKit Milk Collection System is intended to facilitate the expression and collection of breast milk from a lactating woman for the purpose of feeding the collected milk to a child.

Set Up and Assembly

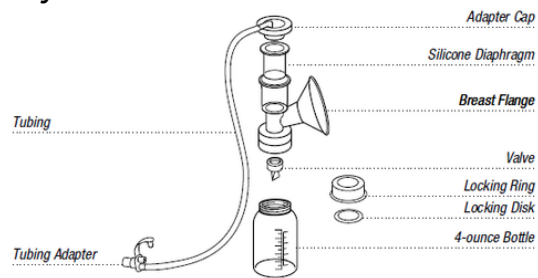

Cleaning

Unless told otherwise by a healthcare provider, follow these cleaning instructions: Always wash hands well with soap and water before handling the Ameda HygieniKit and other Ameda products. Do not use solvents or abrasives.

Before First Use


If your Ameda HygieniKit is marked “STERILE,” open and use.




If your Ameda HygieniKit is NOT marked “STERILE,” before first use:

- Boil all parts—except tubing, adapter cap, and tubing adapter—for 20 minutes.
- Remove all parts from water right after boiling.
- Allow to air dry on a clean, dry surface before assembly and use.


After Every Use

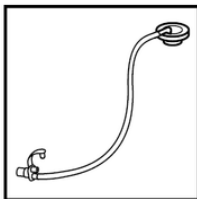

- Take apart the Ameda HygieniKit to clean.
- Rinse any milk residue from pump parts with cool water.
- Wash all parts—except tubing, adapter cap, and tubing adapter—in warm, soapy water.

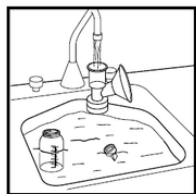

- Rinse well with warm, clean water.
- Allow parts to air dry on clean towel or drying rack before assembly and next use.
- Cover parts with clean towel if not planning to use again right away.

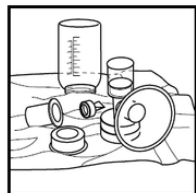

Breast flanges and bottles can be washed on the upper rack of a standard household dishwasher away from heating elements. Wash diaphragms and valves gently by hand.

Do not insert anything into valve while cleaning.

STERILE **EO** **MD**
**Includes/
Contient/Incluye
25mm**

**MADE WITHOUT
BPA**

EN **Universal Single HygieniKit® Milk Collection System 25mm**
STERILE - Contents sterile, unless package is opened or damaged.
Do not use if package is damaged.

FR **Modèle de Système de collecte du lait Single HygieniKit® universel 25 mm**
STÉRILE - le contenu est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

ES **Sistema universal de recolección de leche individual HygieniKit® 25 mm**
ESTÉRIL - Para uso individual de la paciente
El contenido es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.
No usar si el envase está dañado.

DE **Universal HygieniKit® Einseitiges Milchabpumpsystem 25 mm**
STERILE - Inhalt ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril. Nicht verwenden, wenn die Verpackung, beschädigt ist.

IT **Sistema di raccolta del latte HygieniKit® Singolo universale 25mm**
STERILE - Il contenuto è sterile, a meno che la confezione sia aperta o non sia integra. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

PT **Sistema de extração de leite HygieniKit® individual universal 25 mm**
ESTÉRIL - conteúdos são estéreis, salvo se a embalagem for aberta ou danificada. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

NL **Universeel enkelvoudig HygieniKit® -melkopvangsysteem 25 mm**
STERIEL - Inhoud steriel tenzij verpakking geopend of beschadigd is niet gebruiken als de verpakking beschadigd.

DK **Universal Single HygieniKit® mælkeopsamlingsystem 25 mm**
STERILT - Indholdet er sterilt, medmindre pakken er åbnet eller beskadiget. må ikke bruges, hvis emballagener beskadiget.

FI **Yleinen yksittäinen HygieniKit®-maidonkeruujärjestelmä 25 mm**
STERIILI - Pakkauksen sisältö on steriili, jos pakkaus on avaamaton ja ehjä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.


GR **Σύστημα συλλογής γάλακτος μονής άντλησης γενικής χρήσης HygieniKit® 25 mm**
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ - Το περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο, εκτός εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.

TR **Evrensel Tekli HygieniKit® Süt Toplama Sistemi 25 mm**
STERIL - Steril - Paket açılmadığı veya hasar görmedği sürece steril içeriktir. Paket hasarlıysa kullanmayınız.

RO **Pompă de sân universală Single HygieniKit® 25 mm**
STERIL - Conținut steril, cu excepția cazului în care pachetul este deschis sau deteriorat. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

UDI

LOT YYYY-MM-DD


 YYYY-MM-DD



CONTENTS/CONTENU/CONTENIDO/INHALT/CONTENUTO/CONTEÚDO/ INHOUD/INDHOLD/SISÄLTÖ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/İÇERİK/CONTINUT



Please see Instructions for Use to ensure proper and safe use of the Ameda HygieniKit



- (1) Instructions/Instructions/Instructions/Gebrauchsanleitung/Istruzioni/Instruções/Gebruiksaanwijzingen/Vejledning/Käyttöohjeet/**Οδηγίες/Talimatlar/Instruçiuni**
- (1) Storage Bag/Sac de rangement/Bolsa de almacenamiento/Aufbewahrungsbetel/Custodia/Bolsa de arrumação/Bewaarzakje./Opbevaringspose/ Säilytyspussi/**Σακούλα Αποθήκευσης/Saklama Poşeti/Pungă de stocare**
- (1) Adapter Cap/Embout de l'adaptateur/ Tapa del adaptador/Adapterdeckel/ Tappo dell'adattatore/Tampa do Adaptador/ Verbindingskapje/Adapterhætte/Sovittimen korkki/**Πώμα προσαρμογέα/Adaptör Kapağı/Сараç adaptor**
- (1) Silicone Diaphragm/Diaphragme de silicone/Diafragma de silicona/Silikonmembrane/Diaframma in silicone/Diafragma de Silicone/Siliconendiafragma/Silikonediafragma/Silikonikalvo/**Διάφραγμα σιλικόνης/Silikon Diyafram/Diafragmă de silicon**
- (1) Breast Flange (25.0mm)/Manchon pour seins (25,0mm)/Embudo de lactancia (25,0)/ Brustglocke (25,0 mm)/Campana per il seno (25,0 mm)/Flange Mamária/ Kolfstuk (25,0 mm)/Brystflange (25,0 mm)/Rintalaippa (25,0mm)/ **Χοάνη (25,0 mm)/ Göğüs Flaşı (25,0 mm)/Cupă colectoare (25,0 mm)**
- (2) Valves/Valves/Válvulas/Ventile/valvole/Válvulas/ventiel/ventile/venttiilit/ **βαλβίδες/ Valfler/supape**
- (1) Bottle 120mL/Bouteille de 120mL/Botella de 120mL/Flasche (120 mL)/Flacone (120 mL)/Frasco (120mL)/Fles (120mL)/Flaske (120 ml)/Pullo (120 mL)/ **Φιάλη (120mL)/ Şişe (120 mL)/Sticlă (120 mL)**
- (1) Tubing Adapter/Adaptateur pour tubes/Adaptador del tubo/Schlauchadapter/ Adattatore del tubo/Adaptador do Tubo/ Verbindingsstuk voor slang/Slangeadapter/ Letkusovitin/ **Προσαρμογέας σωλήνα/Hortum Adaptörü/Adaptor tuburi**
- (1) Tube/Tubulure/Tubo/Schlauch/Tubo/ Tubo/Slang/Slange/Putki/**Σωλήνας / Tüp/ Tub/**
- (1) Locking Ring/Locking Disc/Anneau de verrouillage/Disque de verrouillage/Anillo de cierre/Disco de cierre/Verriegelungsring/Verriegelungsscheibe/Anello di bloccaggio/ Disco di bloccaggio/Aro de Bloqueo/Disco de Bloqueo/Afsluitring/Afsluitschijf/ Låsering/Låseskive/Lukitusrengas/ Lukituslevy/ **Δακτύλιος ασφάλισης /Δίσκος ασφάλισης/ Kilitleme Halkası/Kilitleme Diski Inel de blocare/Disc de blocare**

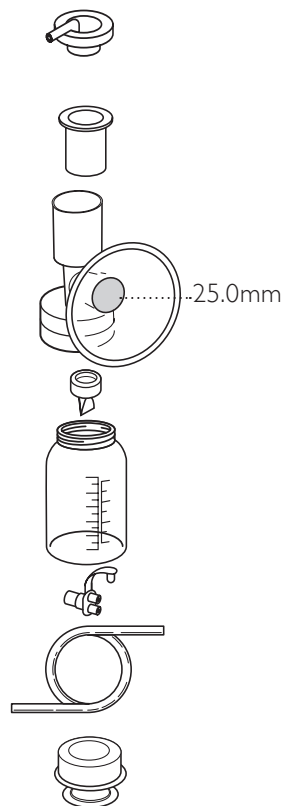

Contents sterile, unless package is opened or damaged. Do not use if package is damaged.

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par :
Mothers Choice Products Ltd
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com

Distributed in Australia by:
Midmed Pty Ltd.
Unit 4, 62 Borthwick Avenue
Murarrie, QLD 4172
61 (7) 3348 9155

Distribution in other countries: For product information or feedback, call your local distributor or location where you purchased the product. For a listing of distributors in your country, please visit www.ameda.com.

Transport/Storage:
Transport/Rangement:
Transporte/almacenamiento:



The Ameda Logo, Ameda and HygieniKit are trademarks and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and other countries. Le logo d'Ameda Logo, Ameda et HygieniKit sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Ameda, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components.

Manufactured for:
Ameda, Inc.
485 Half Day Road, Ste. 302
Buffalo Grove, IL 60089
USA

STERILE EO MD

EN **Universal Single HygieniKit® Milk Collection System 28.5mm**
STERILE - Contents sterile, unless package is opened or damaged.
Do not use if package is damaged.

FR **Modèle de Système de collecte du lait Single HygieniKit® universel 28,5 mm**
STÉRILE - le contenu est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

ES **Sistema universal de recolección de leche individual HygieniKit® 28.5 mm**
ESTÉRIL - Para uso individual de la paciente
El contenido es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.
No usar si el envase está dañado.

DE **Universal HygieniKit® Einseitiges Milchabpumpsystem 28,5 mm**
STERILE - Inhalt ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Packung steril. Nicht verwenden, wenn die Verpackung, beschädigt ist.

IT **Sistema di raccolta del latte HygieniKit® Singolo universale 28,5mm**
STERILE - Il contenuto è sterile, a meno che la confezione sia aperta o non sia integra. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

PT **Sistema de extração de leite HygieniKit® individual universal 28,5 mm**
ESTÉRIL - conteúdos são estéreis, salvo se a embalagem for aberta ou danificada. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

NL **Universeel enkelvoudig HygieniKit® -melkopvangsysteem 28,5 mm**
STERIEL - Inhoud steriel tenzij verpakking geopend of beschadigd is niet gebruiken als de verpakking beschadigd.

DK **Universal Single HygieniKit® mælkeopsamlingsystem 28,5 mm**
STERILT - Indholdet er sterilt, medmindre pakken er åbnet eller beskadiget. må ikke bruges, hvis emballagener beskadiget.

Includes/
Contient/Incluye
28.5mm

MADE WITHOUT
BPA

FI **Yleinen yksittäinen HygieniKit® -maidonkeruujärjestelmä 28,5 mm**
STERIILI - Pakkauksen sisältö on steriili, jos pakkaus on avaamaton ja ehjä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

GR **Σύστημα συλλογής γάλακτος μονής άντλησης γενικής χρήσης HygieniKit® 28,5 mm**
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ - Το περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο, εκτός εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.

TR **Evrensel Tekli HygieniKit® Süt Toplama Sistemi 28,5 mm**
STERIL - Steril - Paket açılmadığı veya hasar görmediği sürece steril içeriştir. Paket hasarlıysa kullanmayınız.

RO **Pompă de sân universală Single HygieniKit® 28,5 mm**
STERIL - Conținut steril, cu excepția cazului în care pachetul este deschis sau deteriorat. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

UDI



LOT YYYY-MM-DD



YYYY-MM-DD




8 10725 02409 6

CONTENTS/CONTENU/CONTENIDO/INHALT/CONTENUTO/CONTEÚDO/ INHOUD/INDHOLD/SISÄLTÖ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/İÇERİK/CONTINUT



Please see Instructions for Use to ensure proper and safe use of the Ameda HygieniKit

- (1) Instructions/Instructions/Instructions/Gebrauchsanleitung/Istruzioni/Instruções/Gebruiksaanwijzingen/Vejledning/Käyttöohjeet/Οδηγίες/Talimatlar/Instruțiuni
- (1) Storage Bag/Sac de rangement/Bolsa de almacenamiento/Aufbewahrungsbetel/Custodia/Bolsa de arrumação/Bewaarzakje./Opbevaringspose/ Säilytyspussi/**Σακούλα Αποθήκευσης/Saklama Poşeti/Pungă de stocare**
- (1) Adapter Cap/Embout de l'adaptateur/ Tapa del adaptador/Adapterdeckel/ Tappo dell'adattatore/Tampa do Adaptador/ Verbindingskapje/Adapterhætte/Sovittimen korkki/**Πώμα προσαρμογέα/Adaptör Kapağı/Сарап adaptor**
- (1) Silicone Diaphragm/Diaphragme de silicone/Diafragma de silicona/Silikonmembrane/Diaframma in silicone/Diafragma de Silicone/Siliconendiafragma/Silikonediafragma/Silikonikalvo/**Διάφραγμα σιλικόνης/Silikon Diyafram/Diafragmă de silicon**
- (1) Breast Flange (28.5mm)/Manchon pour seins (28,5mm)/Embudo de lactancia (28,5)/ Brustglocke (28,5 mm)/Campana per il seno (28,5 mm)/Flange Mamária/Kolfstuk (28,5 mm)/Brystflange (28,5 mm)/Rintalaippa (28,5mm)/ **Χοάνη (28,5mm)/Göğüs Flanşı (28,5 mm)/Cupă colectoare (28,5 mm)**
- (2) Valves/Valves/Válvulas/Ventile/valvole/Válvulas/ventiel/ventile/venttiilit/ **βαλβίδες/Valfler/supape**
- (1) Bottle 120mL/Bouteille de 120mL/Botella de 120mL/Flasche (120 mL)/Flacone (120 mL)/Frasco (120mL)/Fles (120mL)/Flaske (120 ml)/Pullo (120 mL)/ **Φιάλη (120mL)/Şişe (120 mL)/Sticlă (120 mL)**
- (1) Tubing Adapter/Adaptateur pour tubes/Adaptador del tubo/Schlauchadapter/Adattatore del tubo/Adaptador do Tubo/ Verbindingsstuk voor slang/Slangeadapter/Letkusovitin/ **Προσαρμογέας σωλήνα/Hortum Adaptörü/Adaptor tuburi**
- (1) Tube/Tubulure/Tubo/Schlauch/Tubo/ Tubo/Slang/Slange/Putki/**Σωλήνας / Tüp/ Tub/**
- (1) Locking Ring/Locking Disc/Anneau de verrouillage/Disque de verrouillage/Anillo de cierre/Disco de cierre/Verriegelungsring/Verriegelungsscheibe/Anello di bloccaggio/Disco di bloccaggio/Aro de Bloquei/Disco de Bloqueio/Afsluitring/Afsluitschijf/Låsering/Låseskive/Lukitusrengas/ Lukituslevy/ **Δακτύλιος ασφάλισης /Δίσκος ασφάλισης/ Kilitleme Halkası/Kilitleme Diski Inel de blocare/Disc de blocare**

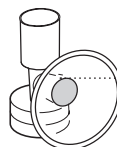

28.5mm



Contents sterile, unless package is opened or damaged. Do not use if package is damaged.

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par :
Mothers Choice Products Ltd
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com

Distributed in Australia by:
Midmed Pty Ltd.
Unit 4, 62 Borthwick Avenue
Murarrie, QLD 4172
61 (7) 3348 9155

Distribution in other countries: For product information or feedback, call your local distributor or location where you purchased the product. For a listing of distributors in your country, please visit www.ameda.com.

Transport/Storage:
Transport/Rangement:
Transporte/almacenamiento:



The Ameda Logo, Ameda and HygieniKit are trademarks and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and other countries. Le logo d'Ameda Logo, Ameda et HygieniKit sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Ameda, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components.

Manufactured for:
Ameda, Inc.
485 Half Day Road, Ste. 302
Buffalo Grove, IL 60089
USA

STERILE EO MD

EN **Universal Single HygieniKit® Milk Collection System 30.5mm**
STERILE - Contents sterile, unless package is opened or damaged.
Do not use if package is damaged.

FR **Modèle de Système de collecte du lait Single HygieniKit® universel 30,5 mm**
STÉRILE - le contenu est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

ES **Sistema universal de recolección de leche individual HygieniKit® 30.5 mm**
ESTÉRIL - Para uso individual de la paciente
El contenido es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.
No usar si el envase está dañado.

DE **Universal HygieniKit® Einseitiges Milchabpumpsystem 30,5 mm**
STERILE - Inhalt ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Packung steril. Nicht verwenden, wenn die Verpackung, beschädigt ist.

IT **Sistema di raccolta del latte HygieniKit® Singolo universale 30,5mm**
STERILE - Il contenuto è sterile, a meno che la confezione sia aperta o non sia integra. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

PT **Sistema de extração de leite HygieniKit® individual universal 30,5 mm**
ESTÉRIL - conteúdos são estéreis, salvo se a embalagem for aberta ou danificada. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

NL **Universeel enkelvoudig HygieniKit® -melkopvangsysteem 30,5 mm**
STERIEL - Inhoud steriel tenzij verpakking geopend of beschadigd is niet gebruiken als de verpakking beschadigd.

DK **Universal Single HygieniKit® mælkeopsamlingsystem 30,5 mm**
STERILT - Indholdet er sterilt, medmindre pakken er åbnet eller beskadiget. må ikke bruges, hvis emballagener beskadiget.

Includes/
Contient/Incluye
30.5mm

MADE WITHOUT
BPA

FI **Yleinen yksittäinen HygieniKit® -maidonkeruujärjestelmä 30,5 mm**
STERIILI - Pakkauksen sisältö on steriili, jos pakkaus on avaamaton ja ehjä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

GR **Σύστημα συλλογής γάλακτος μονής άντλησης γενικής χρήσης HygieniKit® 30,5 mm**
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ - Το περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο, εκτός εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.

TR **Evrensel Tekli HygieniKit® Süt Toplama Sistemi 30,5 mm**
STERIL - Steril - Paket açılmadığı veya hasar görmemiş sürece steril içeriktir. Paket hasarlıysa kullanmayınız.

RO **Pompă de sân universală Single HygieniKit® 30,5 mm**
STERIL - Conținut steril, cu excepția cazului în care pachetul este deschis sau deteriorat. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

UDI



LOT YYYY-MM-DD



YYYY-MM-DD




8 10725 02414 0

CONTENTS/CONTENU/CONTENIDO/INHALT/CONTENUTO/CONTEÚDO/ INHOUD/INDHOLD/SISÄLTÖ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/İÇERİK/CONTINUT



Please see Instructions for Use to ensure proper and safe use of the Ameda HygieniKit

- (1) Instructions/Instructions/Instructions/Gebrauchsanleitung/Istruzioni/Instruções/Gebruiksaanwijzingen/Vejledning/Käyttöohjeet/**Οδηγίες/Talimatlar/Instruçiuni**
- (1) Storage Bag/Sac de rangement/Bolsa de almacenamiento/Aufbewahrungsbetel/Custodia/Bolsa de arrumação/Bewaarzakje./Opbevaringspose/ Säilytyspussi/**Σακούλα Αποθήκευσης/Saklama Poşeti/Pungă de stocare**
- (1) Adapter Cap/Embout de l'adaptateur/ Tapa del adaptador/Adapterdeckel/ Tappo dell'adattatore/Tampa do Adaptador/ Verbindingskapje/Adapterhætte/Sovittimen korkki/**Πώμα προσαρμογέα/Adaptör Kapağı/Сарац adaptor**
- (1) Silicone Diaphragm/Diaphragme de silicone/Diafragma de silicona/Silikonmembrane/Diaframma in silicone/Diafragma de Silicone/Siliconendiafragma/Silikonediafragma/Silikonikalvo/**Διάφραγμα σιλικόνης/Silikon Diyafram/Diafragmă de silicon**
- (1) Breast Flange (30.5mm)/Manchon pour seins (30,5mm)/Embudo de lactancia (30,5)/ Brustglocke (30,5 mm)/Campana per il seno (30,5 mm)/Flange Mamária/Kolfstuk (30,5 mm)/Brystflange (30,5 mm)/Rintalaippa (30,5mm)/ **Χοάνη (30,5mm)/ Göğüs Flaşı (30,5 mm)/Cupă colectoare (30,5 mm)**
- (2) Valves/Valves/Válvulas/Ventile/valvole/Válvulas/ventiel/ventile/venttiilit/ **βαλβίδες/Valfler/supape**
- (1) Bottle 120mL/Bouteille de 120mL/Botella de 120mL/Flasche (120 mL)/Flacone (120 mL)/Frasco (120mL)/Fles (120mL)/Flaske (120 ml)/Pullo (120 mL)/ **Φιάλη (120mL)/ Şişe (120 mL)/Sticlă (120 mL)**
- (1) Tubing Adapter/Adaptateur pour tubes/Adaptador del tubo/Schlauchadapter/Adattatore del tubo/Adaptador do Tubo/ Verbindingsstuk voor slang/Slangeadapter/Letkusovitin/ **Προσαρμογέας σωλήνα/Hortum Adaptörü/Adaptor tuburi**
- (1) Tube/Tubulure/Tubo/Schlauch/Tubo/ Tubo/Slang/Slange/Putki/**Σωλήνας / Tüp/ Tub/**
- (1) Locking Ring/Locking Disc/Anneau de verrouillage/Disque de verrouillage/Anillo de cierre/Disco de cierre/Verriegelungsring/Verriegelungsscheibe/Anello di bloccaggio/Disco di bloccaggio/Aro de Bloqueo/Disco de Bloqueo/Afsluitring/Afsluitschijf/Låsering/Låseskive/Lukitusrengas/ Lukituslevy/ **Δακτύλιος ασφάλισης /Δίσκος ασφάλισης/ Kilitleme Halkası/Kilitleme Diski Inel de blocare/Disc de blocare**

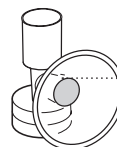

30.5mm



Contents sterile, unless package is opened or damaged. Do not use if package is damaged.

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par :
Mothers Choice Products Ltd
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com

Distributed in Australia by:
Midmed Pty Ltd.
Unit 4, 62 Borthwick Avenue
Murarrie, QLD 4172
61 (7) 3348 9155

Distribution in other countries: For product information or feedback, call your local distributor or location where you purchased the product. For a listing of distributors in your country, please visit www.ameda.com.

Transport/Storage:
Transport/Rangement:
Transporte/almacenamiento:



Manufactured for:
Ameda, Inc.
485 Half Day Road, Ste. 302
Buffalo Grove, IL 60089
USA

The Ameda Logo, Ameda and HygieniKit are trademarks and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and other countries. Le logo d'Ameda Logo, Ameda et HygieniKit sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Ameda, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components.

STERILE EO MD

EN **Universal Dual HygieniKit® Milk Collection System 25mm**
STERILE - Contents sterile, unless package is opened or damaged.
Do not use if package is damaged.

FR **Modèle de Système de collecte du lait Dual HygieniKit® universel 25 mm**
STÉRILE - le contenu est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

ES **Sistema universal de recolección de leche dual HygieniKit® 25 mm**
ESTÉRIL - Para uso individual de la paciente
El contenido es estéril a menos que el envase esté abierto o dañado.
No usar si el envase está dañado.

DE **Universal HygieniKit® Doppelseitiges Milchabpumpsystem 25 mm**
STERILE - Inhalt ist bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung steril. Nicht verwenden, wenn die Verpackung, beschädigt ist.

IT **Sistema di raccolta del latte HygieniKit® Doppio universale 25mm**
STERILE - Il contenuto è sterile, a meno che la confezione sia aperta o non sia integra. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata.

PT **Sistema de extração de leite HygieniKit® duplo universal 25 mm**
ESTÉRIL - conteúdos são estéreis, salvo se a embalagem for aberta ou danificada. Não utilizar se a embalagem estiver danificada.

NL **Universeel dubbel HygieniKit®-melkopvangsysteem 25 mm**
STERIEL - Inhoud steriel tenzij verpakking geopend of beschadigd is niet gebruiken als de verpakking beschadigd.

DK **Universal Dual HygieniKit® mælkeopsamlingsystem 25 mm**
STERILT - Indholdet er sterilt, medmindre pakken er åbnet eller beskadiget. må ikke bruges, hvis emballagener beskadiget.

Includes/
Contient/Incluye
25.0mm

MADE WITHOUT
BPA

FI **Yleinen kaksinkertainen HygieniKit® -maidonkeruujärjestelmä 25 mm**
STERIILI - Pakkauksen sisältö on steriili, jos pakkaus on avaamaton ja ehjä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

GR **Σύστημα συλλογής γάλακτος διπλής άντλησης γενικής χρήσης HygieniKit® 25 mm**
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ - Το περιεχόμενο είναι αποστειρωμένο, εκτός εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει φθαρεί. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.

TR **Evrensel Tkili HygieniKit® Süt Toplama Sistemi 25 mm**
STERIL - Steril - Paket açılmadığı veya hasar görmedigi sürece steril içeriktir. Paket hasarlıysa kullanmayınız.

RO **Sistem pompe de sân universale Dual HygieniKit® 25 mm**
STERIL - Conținut steril, cu excepția cazului în care pachetul este deschis sau deteriorat. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.

UDI



LOT YYYY-MM-DD



YYYY-MM-DD




8 10725 02411 9

CONTENTS/CONTENU/CONTENIDO/INHALT/CONTENUTO/CONTEÚDO/ INHOUD/INDHOLD/SISÄLTÖ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/İÇERİK/CONTINUT




Please see Instructions for Use to ensure proper and safe use of the Ameda HygieniKit

- (1) Instructions/Instructions/Instructions/Gebrauchsanleitung/Istruzioni/Instruções/Gebruiksaanwijzingen/Vejledning/Käyttöohjeet/**Οδηγίες/Talimatlar/Instruçiuni**
- (1) Storage Bag/Sac de rangement/Bolsa de almacenamiento/Aufbewahrungsbetel/Custodia/Bolsa de arrumaçãõ/Bewaarzakje./Opbevaringspose/ Säilytyspussi/**Σακούλα Αποθήκευσης/Saklama Poşeti/Pungã de stocare**
- (1) Adapter Cap/Embout de l'adaptateur/ Tapa del adaptador/Adapterdeckel/ Tappo dell'adattatore/Tampa do Adaptador/ Verbindingskapje/Adapterhætte/Sovittimen korkki/**Πώμα προσαρμογέα/Adaptör Kapağı/Сараç adaptor**
- (1) Silicone Diaphragm/Diaphragme de silicone/Diafragma de silicona/Silikonmembrane/Diaframma in silicone/Diafragma de Silicone/Siliconendiafragma/Silikonediafragma/Silikonikalvo/**Διάφραγμα σιλικόνης/Silikon Diyafram/Diafragmã de silicon**
- (1) Breast Flange (25.0mm)/Manchon pour seins (25,0mm)/Embudo de lactancia (25,0)/ Brustglocke (25,0 mm)/Campana per il seno (25,0 mm)/Flange Mamária/Kolfstuk (25,0 mm)/Brystflange (25,0 mm)/Rintalaippa (25,0mm)/ **Χοάνη (25,0mm)/ Göğüs Flaşı (25,0 mm)/Cupã colectoare (25,0 mm)**
- (2) Valves/Valves/Válvulas/Ventile/valvole/Válvulas/ventiel/ventile/venttiilit/ **βαλβίδες/Valfler/supape**
- (1) Bottle 120mL/Bouteille de 120mL/Botella de 120mL/Flasche (120 mL)/Flacone (120 mL)/Frasco (120mL)/Fles (120mL)/Flaske (120 ml)/Pullo (120 mL)/ **Φιάλη (120mL)/ Şişe (120 mL)/Sticlã (120 mL)**
- (1) Tubing Adapter/Adaptateur pour tubes/Adaptador del tubo/Schlauchadapter/ Adattatore del tubo/Adaptador do Tubo/ Verbindingsstuk voor slang/Slangeadapter/ Letkusovitin/ **Προσαρμογέας σωλήνα/Hortum Adaptörü/Adaptor tuburi**
- (1) Tube/Tubulure/Tubo/Schlauch/Tubo/ Tubo/Slang/Slange/Putki/**Σωλήνας / Tüp/ Tub/**
- (1) Locking Ring/Locking Disc/Anneau de verrouillage/Disque de verrouillage/Anillo de cierre/Disco de cierre/Verriegelungsring/Verriegelungsscheibe/Anello di bloccaggio/ Disco di bloccaggio/Aro de Bloqueo/Disco de Bloqueo/Afsluitring/Afsluitschijf/ Låsering/Låseskive/Lukitusrengas/ Lukituslevy/ **Δακτύλιος ασφάλισης /Δίσκος ασφάλισης/ Kilitleme Halkası/Kilitleme Diski Inel de blocare/Disc de blocare**

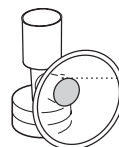

25.0mm

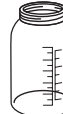

Contents sterile, unless package is opened or damaged. Do not use if package is damaged.

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par :
Mothers Choice Products Ltd
2133-11871 Horseshoe Way
Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com

Distributed in Australia by:
Midmed Pty Ltd.
Unit 4, 62 Borthwick Avenue
Murarrie, QLD 4172
61 (7) 3348 9155

Distribution in other countries: For product information or feedback, call your local distributor or location where you purchased the product. For a listing of distributors in your country, please visit www.ameda.com.

Transport/Storage:
Transport/Rangement:
Transporte/almacenamiento:



Manufactured for:
Ameda, Inc.
485 Half Day Road, Ste. 302
Buffalo Grove, IL 60089
USA

The Ameda Logo, Ameda and HygieniKit are trademarks and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and other countries. Le logo d'Ameda Logo, Ameda et HygieniKit sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Ameda, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components. | Assembled in Mexico with US and foreign components.

